


老人輔具運用四腳助行器 注意事項

103年05月	訂定 1 版
年 月	修訂 版
106年03月	審閱 1 版

一、四腳助行器的使用

1. 股骨大轉子到地面的高度，緊握手把時手肘關節彎曲呈25~30度。把手適於抓握且助行器兩側與腕部同高。
2. 走法

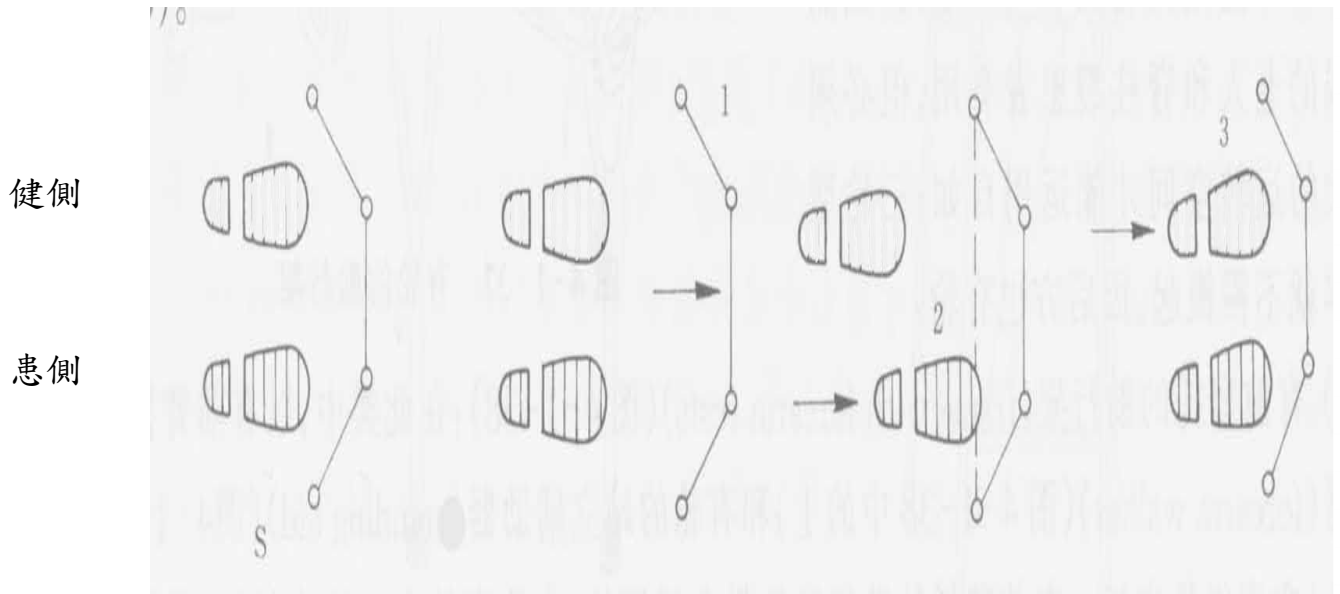

二、注意事項

1. 行走時速度要放慢。
2. 行進間保持眼睛看前方，而不要盯著自己的腳行進。
3. 助行器的腳管必須四腳皆垂直著地，以免翻倒。
4. 不論是何種製品或種類之輔助器具，在與地面接觸的部位都必須加上橡膠墊，才能避免打滑的危險。
5. 避免穿著容易鬆脫的拖鞋，易造成絆腳跌倒的危險。

醫院總機：(049) 2624266 諮詢分機 ()

~~竹山秀傳醫院關心您~~ 護理部 (衛老-02)